

アーモン エデロ


ARMON EDERO®



動

的アームサポートは、上肢機能が制限されている方々を支援するツールです。腕と手を自由に動かすことができるため、上肢の様々な日常動作を行うことを可能にします。ARMON EDERO®は、ユーザーの腕の重量を補う独自の機構を備えています。

腕を無重力に近い状態で動かすことをサポートすることで、上肢の運動機能が制限されている方々でも自身の力を使って腕を持ち上げ動かすことができます。

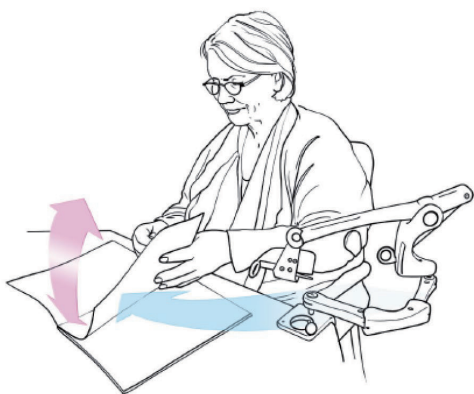

ARMON EDERO®の使用目的

- 静的作業における腕/首/肩に対する負担の軽減
- 人間工学的な動作を伴う作業の補助
- 自立した飲食の補助
- 腕の筋力低下における動作の補助
- 上肢の動作訓練におけるポートデバイスとして※1

※1 上肢動作訓練機器との併用の一例 (左から EsoGLOVE、PABLO、MYRO)





ARMON EDERO®のスプリング補正システムは、簡単なセットアップで、アーム部分にかかる全ての重量を補正します。アーム部分は使用者の自然な動作に追従することで、ユーザー自身の制御で腕をあらゆる方向に簡単に動かすことを可能にします。

特徴

▼ テーブルに専用のクランプを取り付けて使用します。

- 装着が簡単/取外しにツールが不要
- 軽量 (約2.5kg)
- 人間工学に基づいた構造
- 堅牢なアルミ製のハウジング
- 様々なサイズのブレース (肘置き) を準備 (オプション)



ARMON EDERO® 専用ブレース (肘置き)

ARMON EDERO®のブレースはユーザーの腕の周囲径に合わせて3サイズから選択頂けます。また、オプションで他のサイズの追加購入も可能です。



サイズ	寸法	腕の周囲径
M	12×6cm	<19cm
L	12×8cm	19 - 25cm
XL	12×10cm	>25cm

ダイナミックアームサポートシステム

ARMON EDERO®

寸法 (梱包)	49×29×17cm (L/W/H)
重量	約 2,800g
免荷量	900～4,800g (10段階で調整可能)
製品構成	・アームユニット ・テーブルクランプ (クランプ+接続リンク) ・ブレース (肘置き)※2 ※2 Lサイズが納品時の標準サイズです。



インターリハ株式会社

Inter Reha
Advanced Rehabilitation and Healthcare

〒114-0016 東京都北区上中里 1-37-15 2F
TEL : 03(5974)0231 FAX : 03(5974)0233
http://www.irc-web.co.jp E-mail: irc@irc-web.co.jp
営業所: 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 九州 / フィジオセンター